

CE EU-conformiteits- verklaring

Opbouw / type Saturatie


Wij,

Roessingh Dienstengroep B.V.
h.o.d.n. rdgKompagne
Josink Esweg 13
7545 PN Enschede



verklaren dat geheel onder eigen verantwoordelijkheid deze Opbouw type Saturatie (OS) in alle varianten met accessoires, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Verordening Medische Hulpmiddelen (2017/745/EU)
- Richtlijn Machines (2006/42/EG)

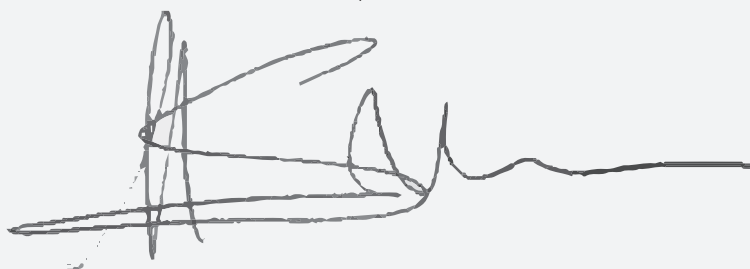Enschede, 04 Juni 2024



Eric Schonewille
Algemeen Directeur / CEO

CE   UDI-DI OS MD klasse I SRN NL-MF-000041828



Waarschuwingen

Opbouw / type Saturatie

Lees deze instructies en waarschuwingen voor gebruik goed door.

Gebruik deze saturatieopbouw uitsluitend waar deze voor bedoeld is: het monteren van een saturatieapparaat op een rolstoel of buggy. Plaats geen andere zaken dan zoals deze tijdens de uitlevering gepresenteerd zijn. Demonteer de opbouw niet verder dan tijdens de uitlevering en in de bijgeleverde handleiding getoond is. Door eigen toevoegingen en of wijzigingen komt de aansprakelijkheid en garantie door rdgKompagne te vervallen.

Opbouw demonteren

Het is niet toegestaan de opbouw zonder toestemming van rdgKompagne van de rolstoel te verwijderen.

Opbouw reinigen

Voordat de opbouw gereinigd wordt moet het apparaat verwijderd worden. Gebruik een licht bevochtigde doek, evt aangevuld met allesreiniger, om de opbouw schoon te maken. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen, overmatig watergebruik en het binnendringen van vocht.

Storingen en/of defecten met betrekking tot de opbouw

In geval van storingen of defecten: voer geen handelingen uit, anders dan in deze handleiding wordt getoond. Het is niet toegestaan zelf onderdelen los te halen of vervangen. Neem in het geval van storingen of defecten met betrekking tot de voeding en/of opbouw contact op met onze helpdesk: 088-0310310 of <https://rdgkompagne.nl/helpdesk>.

Apparaat instructies

Raadpleeg de meegeleverde handleidingen van het apparaat voor instructies met betrekking tot de bediening, het onderhoud en andere zaken betreffende het beademingsapparaat.



Instructies


Opbouw / type Saturatie

Deze handleiding toont de belangrijkste gebruiksinstructies voor de saturatieopbouwen van rdgKompagne/GELOTech. Het geleverde exemplaar kan enigszins afwijken van de getoonde illustraties. De werking zal echter vergelijkbaar zijn.

RAD-G



Apparaat (de)monteren

De RAD-G wordt in een houder geklemd door de twee zijvlakken. Schuif deze uit elkaar voor het plaatsen en verwijderen van de RAD-G in de in-use tas er tussen. Zorg altijd dat het apparaat is losgekoppeld.

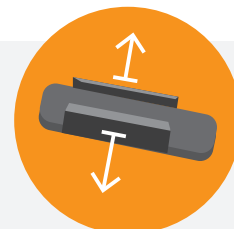

Arm positioneren

De arm wordt zo goed mogelijk afgesteld aangeleverd. Het kan echter zijn dat de positie tijdens gebruik moet worden gefinetuned. De arm is eenvoudig te verstellen middels de aangegeven klemhendels (A) om de beste positie van het hulpmiddel te vinden. Zorg altijd dat het hulpmiddel van de arm gehaald is voordat deze versteld wordt.

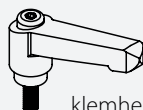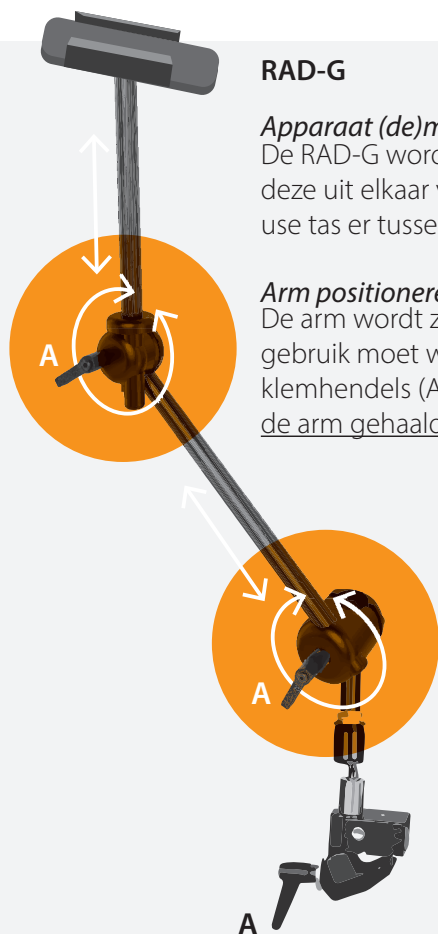


klemhendel

Let op dat bij het losdraaien van de hendels het bovenliggende deel van de arm loskomt.

Arm (de)monteren

De arm wordt met een superklem op de daarvoor meest geschikte plek bevestigd. In het geval deze tijdelijk verwijderd moet worden, plaats deze altijd terug op dezelfde plek. Zorg altijd dat het hulpmiddel van de arm gehaald is voordat deze verwijderd wordt.

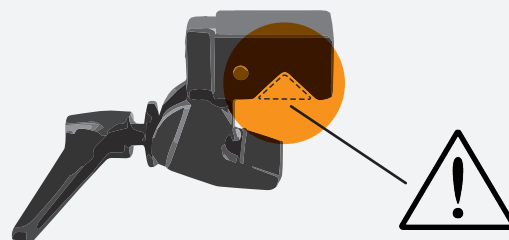

Let op dat bij het klemmen op een plat vlak de uitsparing opgevuld moet zijn. Bij een (buizen)frame moet deze juist leeg zijn voor optimale grip.

RAD-8 en RAD-97

De RAD-8 en RAD-97 worden simpelweg in de in-use tas in het geraamte van de opbouw geplaatst. Dit geraamte kan niet verwijderd worden. Bij het plaatsen en verwijderen van de apparaten moeten eerst de kabels losgekoppeld worden. Til hierna de apparaten in de in-use tas uit het geraamte.